



«Omega» Implant

Implant Motor with integrated
coolant pump easy and uncomplicated to use
Brushless motor



«Omega» Implant



Brushless Micromotor



Electronic Calibration of ContraAngle



Available with 3 different Pedal



Built to Last



User Friendly



30000 RPM



Torque: 51 Ncm

**CA
20:1**




**The new generation...
of Power and Control**

**Available with
Contrangle 20:1**

«Omega» Implant

Implant Motor with integrated
coolant pump easy and uncomplicated to use
Brushless motor

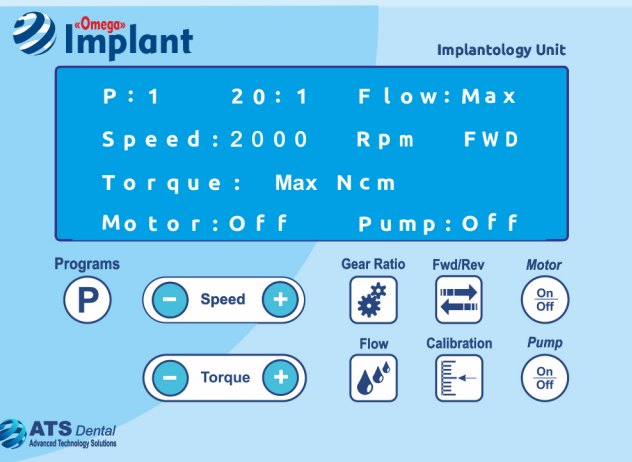

Our **OMEGA IMPLANT** is a compact tabletop unit. All necessary treatment stages of implantology can be performed safely and precisely using just one 20:1 contra-angle.

OMEGA IMPLANT is equipped with **Contra-Angle calibration**: the precision of the motor is adapted to the contra-angle connected.

OMEGA IMPLANT also delivers the highest standards of ergonomics and flexibility.

The motor torque is **72 Ncm** and the motor speed range is **400 – 40,000 rpm (20 - 2000 with 20:1 contra-angle)**.



«DeLuxe» Multifunction Foot Control

Programs switching - Activation and Deactivation of the coolant pump - Clockwise/ Anticlockwise rotation - ON/OFF function. The reostatic effect is ensured by means of a **specialized «pressure sensor»**. There are NO mechanical or moving parts.



Advanced Irrigation Pump

- Easy set up of irrigation tubes - Very ergonomic opening and closing system - Better control of irrigation flow with very constant flow rate - Stable and quiet operations - 3 Flow Rates available: MIN - MED - MAX

ATS Dental



Via Vecchia Provinciale Lucchese, 49
51034 SERRAVALLE PISTOIESE (PT)-ITALY
info@atsdental.it - www.atsdental.it



ایران، تهران، مطهری، خیابان علی اکبری، خیابان صحاف زاده، پلاک ۵۲، طبقه ۴

Info@etemadtejaratkeyhan.co

www.etemadtejaratkeyhan.co

+۹۸۲۱ ۸۶۰ ۳۰ ۳۴۴

+۹۸۲۱ ۸۶۰ ۳۰ ۳۴۸

+۹۸۲۱ ۸۶۰ ۳۰ ۳۵۹

+۹۸۲۱ ۸۶۰ ۳۰ ۳۵۶

